


<b>Klinisk Biokemisk Afdeling, AHH</b>	Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. <b>Labka II: Brug af Labka II på Rover i klinik</b>				Niveau: <b>Alle instrukser</b>	
Dokument ID: <b>7980</b>	Forfatter: <b>GHØ</b>	Redaktør: <b>GHØ</b>	Dokumentansvarlig: <b>sysadm</b>	Version: <b>1</b>	Godkendt af: <b>LMO</b>	
Dokumentbrugere: <b>sysadm, uv</b>					<b>2019-09-16</b>	

## Rover arbejdsgang Trin for Trin

Vælg DXC ikonet forneden



Indlogging:

Brugernavn = BAMID (brugernavn kan scannes)

Adgangskode = Din regionale adgangskode

Kontroller afdelingskoden, f.eks. 316(HH)




Sæt flueben i "Vælg flere rekvisitioner" hvis der er flere PTB'er

Scan patientarmbånd eller sundhedskort – alternativt indtast CPR.nr. <Fortsæt>



Scan rekvisitionsnumrene fra PTB'erne for at sikre at der er match mellem rekvisitioner og CPR nummer

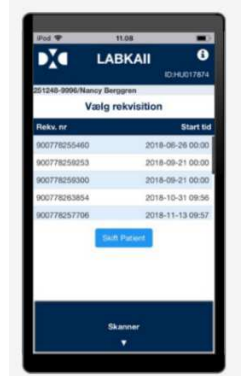

VEND

Her kan tilføjes Klinisk Info

Klik på den kliniske information for at svare den.  
Vælg eller skriv svar og herefter "Send svar"  
Tryk herefter på "Registrer prøver"

Efter scanning fremkommer en liste over de numre der er scannet.  
Under listen angives hvor mange glas der mangler at blive scannet.  
"Afslut"  
Klar til næste patient



## Revisionslog

Version	Godkendt	Ændringskommentar
1	2019.09.16	